

B431DN の印字ずれにおけるオフセットの登録方法について


自賠責のレセプトは印字にずれが生じる場合がありますが、オフセット機能を利用することで、印字が正しくできるように調整が可能です。

1.

日医標準レセプトソフトの[(M00)マスターメニュー]より、[01 医事業務] → [91 マスタ登録] → [101 システム管理マスタ]を開き、[管理コード：1031 出力先プリンタ割り当て情報]を展開します。

2.

下図のように、[出力先プリンタ割り当て情報]が表示されますので、[オフセット]を押下します。

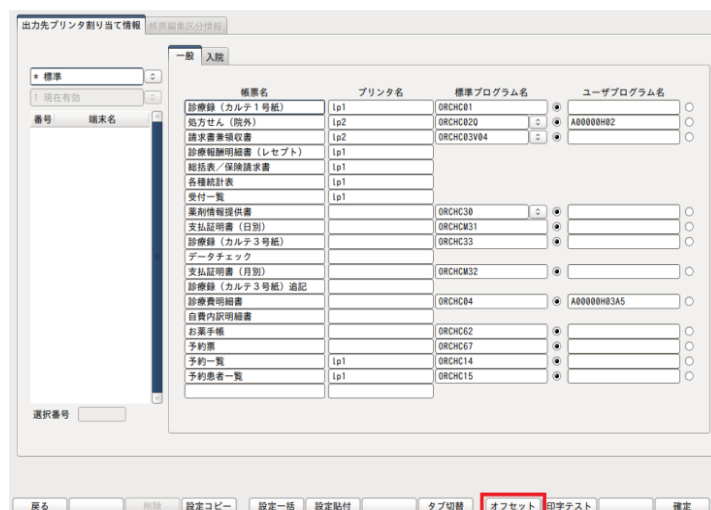

3.

オフセットの設定画面が表示されますので、以下 4 種類の帳票を対象に設定をおこなってください。

[帳票 ID]


■ 診療報酬明細書(自賠責)

- ・ HCM54V02.red (新様式：入院外)
- ・ HCN54V04.red (新様式：入院)
- ・ HCM25V02.red (従来様式：入院外)
- ・ HCN25V03.red (従来様式：入院)

[プリンタ名]：CUPS のプリンタ名をご確認ください

[x 方向]：全帳票を対象に[-0.1]を設定してください

[y 方向]：全帳票を対象に空白を設定してください (0 を入力することはできません)

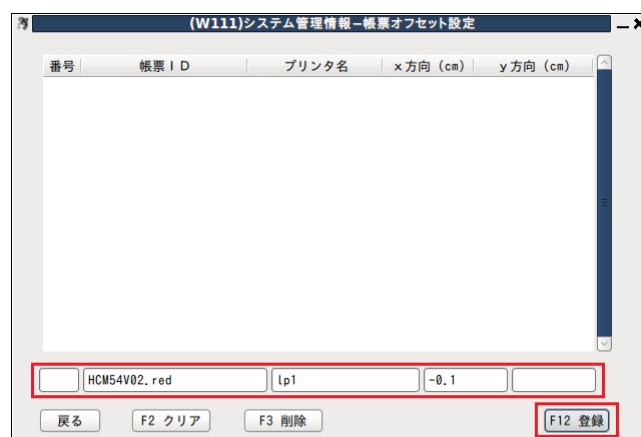

4.

右図のように 4 種類の帳票が登録されている
ことをご確認ください。

※

必要なくなった設定については、[削除]を
おこなうことが可能です。



番号	帳票 I D	プリンタ名	x 方向 (cm)	y 方向 (cm)
1	HCM25V02. red	lp1	-0.1	
2	HCM54V02. red	lp1	-0.1	
3	HCN25V03. red	lp1	-0.1	
4	HCN54V04. red	lp1	-0.1	

Buttons: 戻る, F2 クリア, F3 削除, F12 登録

各帳票 ID の調査方法、帳票 ID の一覧は、下記 URL をご参照ください。

■ フォーム ID の調べ方 <http://manual.orca.med.or.jp/4.7/html/?page=1287>

5.

オフセットの設定が登録されたことを確認後、[戻る]を押下し、[出力先プリンタ割り当て情報]画面にて
[確定]を押下し、[OK]としてください。

6.

設定内容を反映させるため、[戻る]を押下し、下図のマスターメニューまで戻ってください。



01 医事業務

03 プログラム更新

日レセから自動送信による地域マップを日本医師会ホームページにて公開中です。ご協力ください。
F4 キー（調査協力ボタン）で参加登録をお願いします。

標準提供マスタ 最終更新日 H25.10.27
マスタ更新は正常に終了しました。
ライセンスマスタ 最終更新日 H25.10.27
マスタ更新は正常に終了しました。

「日医標準レセプトソフト Version 4.7.0」
Copyright (C) 2002 社団法人日本医師会
このソフトウェアは「日医オープンソース使用許諾契約」の下に公開
されたものです。
上記使用許諾契約をお読み頂き、必ず同意の上ご利用ください。
上記使用許諾契約は、下の「情報」ボタンを押すことで表示されます。

選択番号

終了 調査協力 環境設定 (まとめ) ユーザ管理 情報

以上でオフセットの設定は完了となります。

[42 明細書]より、オフセットの対象帳票について印刷処理をおこなっていただき、
[プレビュー]あるいは[印刷する]にて変更内容をご確認ください。