

mac OS12(Intel Mac)で医見書を利用するための設定方法

【作業手順】

- (1) 医見書ソフトのインストール
- (2) 医見書ソフトを最新バージョンにするためバージョンアップをおこなう
(オフラインバージョンアップ)
- (3) Firebird2.0 をアンインストールし、Firebird2.5 をインストール
- (4) 印刷ファイルの差し替えと DB 変換作業をおこなう

【macOS のバージョンの確認方法】



1.

画面左上のアップルマークをクリックし、[このMacについて]を選択します。



2.

OS の情報が表示されます。

バージョン番号とプロセッサに(Intel)と表示されていることをご確認ください。

【操作方法】

- (1) 医見書ソフト(2016 年 4 月以降にリリースしたソフト【システム:3.2.4】)のインストール
医見書ソフトのインストールをおこないます。

- (2) 医見書ソフトの最新バージョンアップをおこなう(オフラインバージョンアップ)

下記 URL よりバージョンアップ用のプログラムをダウンロードし、インストールをおこないます。

◆医見書: アップデート (最新版へのバージョンアップ)

<https://www.orca.med.or.jp/ikensyo/update.html>

アクセスしていただくと、アップデート(最新版へのバージョンアップ)画面が表示されます。

「オフラインで適用」をクリックし、オフライン用アップデートから「Mac OSX 用アップデートパッケージ」をダウンロードし、インストールをおこなってください。

(3) Firebird2.0 をアンインストールし、Firebird2.5 をインストール


下記 URL から Firebird2.5 のインストーラをダウンロードしてください。

◆OSC 医見書: [[Monterey(macOS 12)への対応]

<http://orca-support-center.jp/ikensyo/supportos/macosx.html>

◇Firebird2.0 のアンインストール

Firebird2.0 の削除をおこなうため、以下の操作をおこないます。

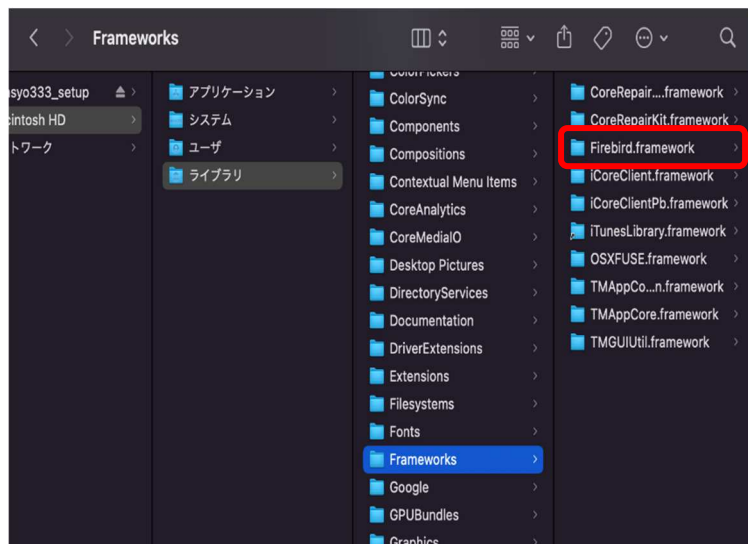

1.


Firebird のアンインストールをおこないます。
[Macintosh HD]→[ライブラリ]→
[Frameworks]の順に開きます。

2.

[Frameworks]内にある
「Firebird.Framework」をゴミ箱に
捨ててください。


Firebird2.0 をアンインストールが完了しましたら、Firebird2.5 のインストール作業をおこないます。

◇Firebird2.5 のインストール

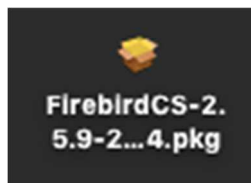


※

事前にダウンロードしていただいた左記
ファイルがデスクトップにあるかご確認ください。

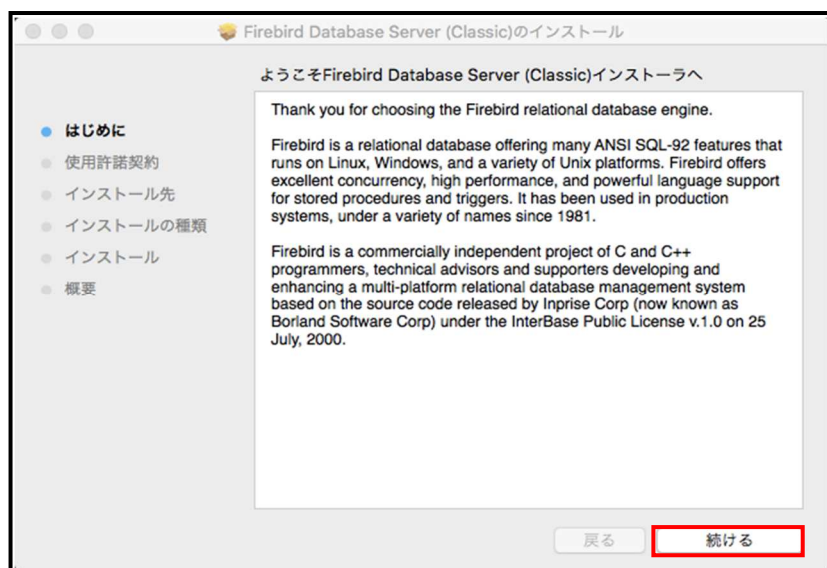


1.

[FirebirdCS-2.5.9-27139-x86_64.pkg]をダブル
クリックするとインストーラが表示されます
ので[続ける]をクリックしてください。

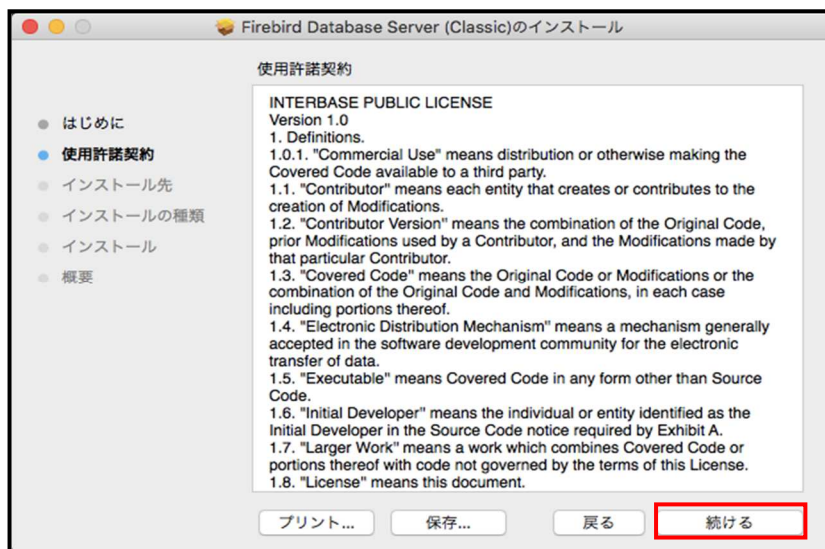

2.

使用許諾契約画面が表示されるので、
[続ける]をクリックしてください。

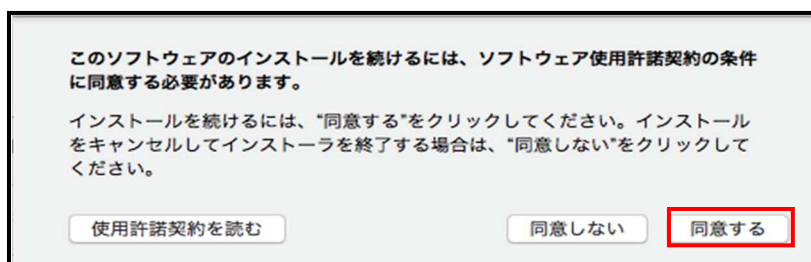

3.

同意画面が表示されましたら、[同意する]を
クリックしてください。



4.


インストール先の選択画面が表示される
場合は、[続ける]をクリックしてください。



5.
インストール画面が表示されるので、
[インストール]をクリックしてください。



6.
パスワード入力画面が表示されるので、
パスワードを入力してください。

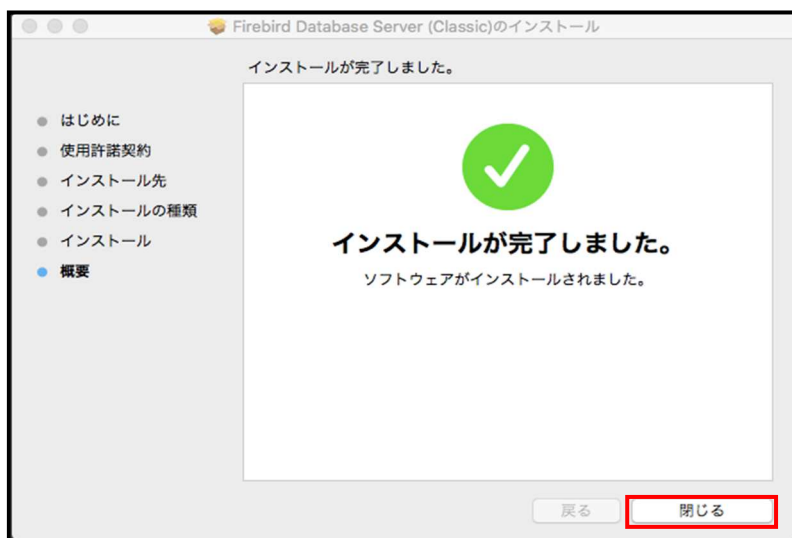



7.
インストールが始まります。完了したら、
[閉じる]をクリックしてください。
- インストールが完了したら、PC を再起動
してください。

(4) 印刷ファイルの差し替えと DB 変換作業をおこなう

下記 URL からの[bridge.jar]をダウンロードし、PC のデスクトップに配置してください。

◆OSC 医見書: [[Monterey(macOS 12)への対応]

<http://orca-support-center.jp/ikensyo/supportos/macosex.html>

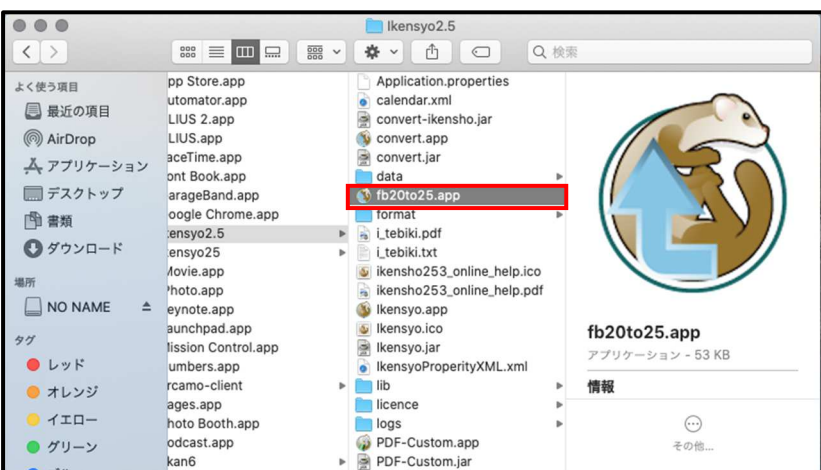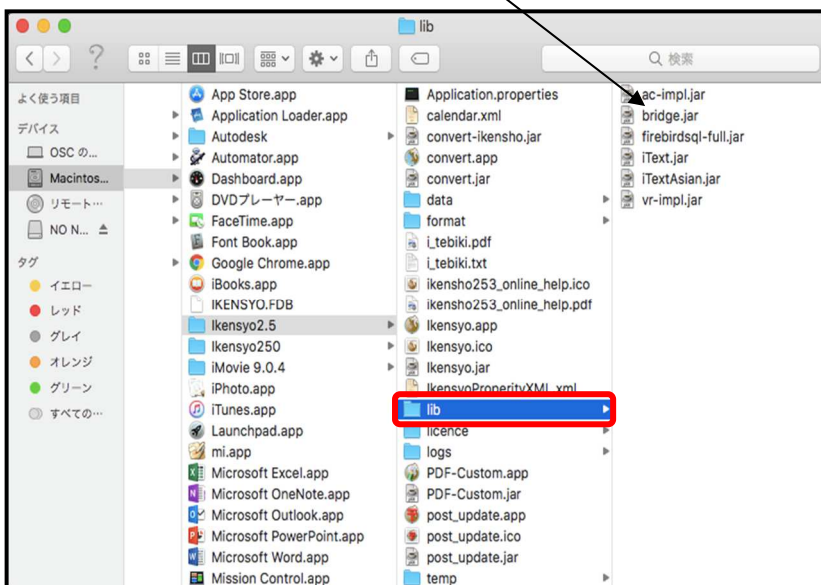

※

事前にダウンロードしていただいた左記ファイルがデスクトップにあるかご確認ください

1. 確認できましたら、[HD]→[アプリケーション]→[ikensyo2.5]→[lib]フォルダを開きます。


ダウンロードした[bridge.jar]を[lib]内に移動してください。

[置き換えますか?] とメッセージが表示されたら、[置き換える] を選択してください。

置き換えができましたら、一旦画面を閉じます。


2. [HD]→[アプリケーション]→[ikensyo2.5]の順に開きます。
[ikensyo2.5]フォルダ内にある[fb20to25.app]をキーボードの「control」キー押しながら「開く」をクリックしてください。

3. 左図メッセージが表示されましたら「キャンセル」をクリックします。

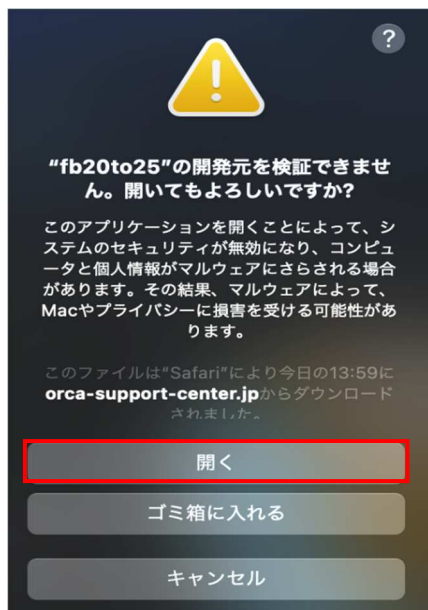


4.

再度[fb20to25.app]をキーボードの「control」キー押しながら「開く」をクリックしてください。左図のメッセージが表示されましたら「開く」をクリックします。

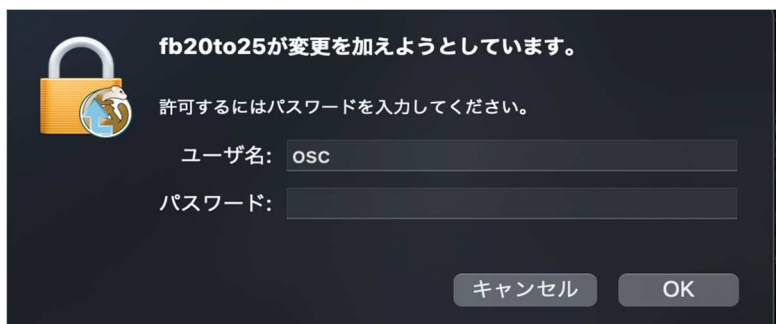

5.

パスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力してください。

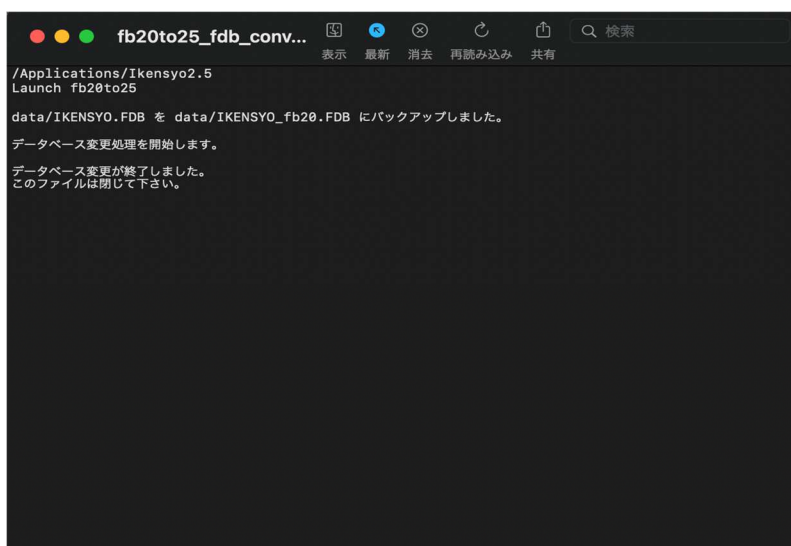

6.

[fb20to25.app]を実行時に左記画面が表示されましたら、DBの変換が終了したので、画面を閉じていただき、医見書の動作確認をおこなってください。

作業は以上となります。